



Equipos y accesorios

Fabricados por **FAETA**





Autoclaves a vapor Modelo ISV 5000



Descripción

Módulo expuesto o para empotrar.
SIMPLE O DOBLE PUERTA, DESLIZANTES VERTICIALES CONTRAPESADAS.
Doble cámara rectangular de acero inoxidable AISI 316 L.
Con generador de vapor de acero inoxidable AISI 316, y/o conexión a red de vapor central.
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado con pantalla touch screen e impresora alfanumérica.

Medidas especiales
a pedido.

Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad)

- 42x42x100 cm (176 Litros)
- 52x52x100 cm (270 Litros)
- 66x66x125 cm (544 Litros)



www.faeta.com.ar

FAETA S. A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Autoclaves de Esterilización por óxido de etileno puro 100% Modelo ETO 4000



Descripción

Módulo expuesto o para empotrar.
SIMPLE O DOBLE PUERTA, DESLIZANTES VERTICIALES CONTRAPESADAS.
Doble cámara rectangular o cilíndrica de acero inoxidable AISI 316 L.
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado con pantalla *touch screen* e impresora alfanumérica.
Con técnica sub-atmosférica.

Medidas especiales
a pedido.

Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad)

- 40x40x100cm (160 Litros)
- 50x50x100 cm (250 Litros)
- 60x60x125 cm (450 Litros)



www.faeta.com.ar

FAETA S. A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Estufas de Esterilización y Secado (con microprocesador digital)



Descripción

Cuerpo externo esmaltado con pintura EPOXI termoconvertible con cámara interna y contrapuerta en acero inoxidable AISI 304.

Opcional TOTALMENTE en acero inoxidable AISI 304

Medidas especiales a pedido.

MODELO	medidas internas	Litros
33 H	33 x 25 x 25 cm.	20
45 H	45 x 30 x 30 cm.	40
60 H	60 x 40 x 40 cm.	96
70 H	70 x 50 x 50 cm.	175
60 HF*	60 x 40 x 40 cm.	96
70 HF*	70 x 50 x 50 cm.	175

60 HF y 70 HF Con circulación de **aire forzado**



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Estufas Cultivo Bacteriológico

(con microprocesador digital)



Estufa cultivo

Cuerpo externo esmaltado con pintura EPOXI termoconvertible con cámara interna y contrapuerta en acero inoxidable AISI 304 y con puerta interna de vidrio transparente.

Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad)

- 30x40x30 cm (36 Litros)
- 40x60x40 cm (96 Litros)
- 50x70x50 cm (175 Litros)



Baño María

Modelos: Con termostato Hidráulico o Digital.

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304, con 2 gradillas de acero inoxidable y capacidad para 30 tubos cada una.



Modulo de Estufas de Esterilización y Secado



Descripción

Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
Módulo expuesto o para empotrar, de una o dos estufas superpuestas y de uno o dos frentes.
Con circulación de aire forzado.
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado e impresora alfanumérica.

Medidas especiales
a pedido.

Medidas internas útiles:

(frente x alto x profundidad)

- 60x40x40 cm (96 Litros)
- 60x50x50 cm (150 Litros)
- 70x50x50 cm (175 Litros)



www.faeta.com.ar

FAETA S. A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Lavador de chatas (Sistema Americano)



Descripción

MODELO LT CON TANQUE INTERMEDIARIO Y ELECTROBOMBA

Este equipo lava con agua a presión (con o sin desinfectante) por electrobomba accionada a botonera desde el frente del mismo, efectuado por tres difusores de agua, 2 para lavado interno y 1 para lavado externo.

Suministros para su instalación:

Conexión de agua para tanque intermedio de ½" de diámetro, altura de piso a 1150 mm.

Conexión de drenaje a sifón de 4" de diámetro a cloaca.

Línea 220 V. 3 Amp.

Medidas externas:

- Frente: 52 cm.
- Profundidad: 33 cm.
- Alto: 133 cm.

www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar





Accesorios Acero Inoxidable AISI 304



Cajas con o sin perforación

largo x ancho x alto

17 x 7 x 3 cm.
 20 x 10 x 4 cm.
 22 x 12 x 5 cm.
 25 x 12 x 5 cm.
 28 x 14 x 7 cm.
 32 x 12 x 7 cm.
 34 x 16 x 7 cm.
 40 x 20 x 8 cm.
 40 x 20 x 10 cm.
 40 x 30 x 10 cm.
 40 x 30 x 12 cm.
 45 x 20 x 10 cm.
 45 x 25 x 10 cm.
 45 x 30 x 10 cm.
 50 x 20 x 10 cm.


Tambores

diámetro x altura

12 x 10 cm.
 16 x 12 cm.
 19 x 14 cm.
 20 x 20 cm.
 24 x 20 cm.
 28 x 16 cm.
 28 x 22 cm.
 33 x 16 cm.
 33 x 25 cm.
 38 x 16 cm.
 38 x 25 cm.



Accesorios Acero Inoxidable AISI 304: Bandejas, riñoneras, chatas y Containers

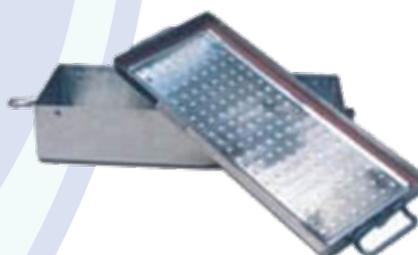

Containers (Cajas cribadas)

Perforadas en tapa y fondo con filtro.

largo x ancho x alto
40 x 20 x 10 cm.
50 x 20 x 10 cm.

Bandejas y cubetas

largo x ancho x alto
20 x 10 x 2 cm.
21 x 19 x 2 cm.
31 x 20 x 2 cm.
40 x 26 x 2 cm.
23 x 13 x 5 cm.
27 x 17 x 5 cm.
31 x 20 x 5 cm.
35 x 24 x 5 cm.

cubeta reniforme
26 x 13 x 5 cm.



Chatas

42 cm.



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Cámaras Mortuorias



Descripción

CÁMARA FRIGORIFICA MORTUORIA DE 2 y 3 CATRES. MODELO FRONTAL.

GABINETE:

Interno y externo construídos totalmente en Acero Inoxidable calidad 304 formado por paneles termoaislantes inyectados en poliuretano de 45 Kg/m³ de densidad y 100 mm. de espesor con refuerzos estructurales interiores que permiten el montaje de cremalleras. Con porta tarjeta en cada puerta y luz interna. A cada catre se accede por una puerta individual con cierre y cerradura.

MARCOS DE LAS PUERTAS: Están equipados con un dispositivo especial para eliminar la condensación alrededor de las puertas, compuestos por resistencias calefactoras del marco con su correspondiente fuente de bajo voltaje.

CREMALLERAS: Del sistema de enchufe y auto-sostenidas, construídas totalmente en Acero Inoxidable calidad 304 de 2,5 mm. de espesor. Equipadas con un sistemas de guías fijas y móviles montadas sobre un sistema de rulemanes sellados en teflón que permiten el fácil y silencioso desplazamiento de las bandejas.

BANDEJAS: De fácil desmonte. Construídas en una sola pieza de Acero Inoxidable calidad AISI 304 de 1,5 mm. de espesor, soladadas en atmósfera de argón y perfectamente pulidas.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Unidad condensadora de $\frac{3}{4}$ HP PARA MODELO DE 2 CATRES, Y DE 1 hp PARA EL MODELO DE 3 CATRES, integral compacta con evaporadoras de aire forzado. Descongelamiento automático, sistema de control central de alarmas de funcionamiento digital programable. Instalada sobre cremalleras que permiten su fácil y rápido desmonte desde el exterior.



Argentina



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires

República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Mesas de Autopsia



Descripción

Construcción: totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304-18/8, soldada en atmósfera de argón con pulido sanitario brillante.

Medidas externas (en metros): 2,62 de largo x 0,78 de ancho x 0,92 de alto. Equipado con sistema de lavado perimetral continuo de agua fría y caliente.

Pileta de lavado: Ubicada en un extremo de la mesa, equipada con pico móvil monocomando de agua fría y caliente.

En un lateral se ubica un duchador flexible de agua fría y caliente con alcance a toda la superficie de la mesa.

Bandejas superiores: construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 compuesta por SIETE secciones removibles, perforadas para un eficiente drenaje.

Pedestal construido en acero inoxidable calidad AISI 304 del tipo central que permite la fijación al piso del equipo, y a través de sus puertas de inspección el acceso a las cañerías de agua, desagües y conexiones eléctricas.

Comandos: compuesto por el conjunto de llaves de maniobra para el accionamiento del sistema de lavado continuo perimetral de agua fría y caliente e interruptor eléctrico del triturador.

Accesorios incluidos:

- Desintegrador-triturador de residuos patológicos.
- Bandeja para instrumental y apoyacabezas, ambos construidos en acero inoxidable calidad AISI 304.



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Módulo de Lavado ultrasónico y enjuague a presión de instrumental quirúrgico



Descripción

Construcción de los módulos: Mesas, frentes, laterales, piletas, bateas y tapas en acero inoxidable calidad AISI 304.
Lavado ultrasónico y enjuague a presión de funcionamiento automático.
Tapa con un canasto de acero inox. calidad AISI 304; abisagrada con burlete, anticústica. En la misma tapa se ubican los eyectores rociadores de agua a presión producida por una elctrobomba.

Con canasto de acero inox. calidad AISI 304.
Capacidad: 70 litros.
Transductores: 6 cerámicos piezoeléctricos
Frecuencia: 24 Khz.
Potencia ultrasónica: de 500 a 1500 Watts
Alimentación eléctrica: 220 V – 50 Hz

Medida módulo (frente x alto x profundidad)
110 x 85 x 65 cm.

Medida pileta/batea
50 x 40 x 35 cm.



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Módulo de Secado por circulación de aire forzado para instrumental quirúrgico



Descripción

Construcción de los módulos: Mesas, frentes, laterales, piletas, bateas y tapas en acero inoxidable calidad AISI 304.

Secado por circulación de aire forzado que impulsado por un motor de 2800 RPM es removido transversalmente por entre las resistencias blindadas que producen la calefacción. Si el operador lo desea, podrá apagarse la calefacción para efectuar el enfriamiento del instrumental por circulación de aire forzado.

Sobre la pileta se ubica una tapa abisagrada y con burlete.

En el frente del equipo se ubica un tablero que contiene:

- Timer para el control de tiempo y encendido de las resistencias
- Termorregulador para control de la temperatura
- Luces indicadoras de funcionamiento

Medida módulo (frente x alto x profundidad)

85 x 85 x 65 cm.

Medida pileta/batea

50 x 40 x 25 cm.



www.faeta.com.ar

FAETA S.A. Vicente Lopez 1364 - CP1870 Avellaneda | Buenos Aires
República Argentina | TEL /FAX: (+54) 11 4205 2858 - faeta@faeta.com.ar



Lactario(cocina de leche)



Descripción

1. Prelavado de biberones y lavado de tetinas
2. Lavadora de biberones a cepillo rotativo
3. Enjuague de biberones
4. Secadora de biberones
5. Autoclave para esterilización de biberones y tetinas
6. Expendedor de fórmulas lácteas
7. Procesadora de fórmulas lácteas, pasteurizadora de leche.
8. Hervidor – Calendaror de biberones. Caja porta canasto de biberones para traslado.